


## Mål til kørestol

1. **hoft bredde:**  
Målet tages over det bredeste sted (hofter eller lår), når personen sidder.
2. **Sædedybde:**  
I siddende stilling måles afstanden fra knæhase til bageste punkt (korsben). OBS! for rotation og ulige benlængder, mål da højre og venstre ben hver for sig.
3. **Underbenslængde:**  
Personen skal sidde med 90° knæbøjning. Mål afstanden fra knæhase til underkant af skohæl.
4. **Sædehøjde over gulv:**  
Mål afstanden fra gulv til overkant af sædepude. Hvis sædet er vinklet, måles både i for- og bagkant.
5. **Ryghøjde:**  
Målet tages mens personen sidder og helst fra ryggen. Mål afstanden fra overkant af sædepude til henholdsvis axil, skulder og hoved. OBS! for store afvigelser fra symmetrien.
6. **Rygbredde:**  
Målet tages på det bredeste sted i forhold til hvor rygstøtten skal være.
7. **Sæde – albue:**  
Målet tages mens personen sidder med albuen bøjet 90°. Mål fra overkant af sædepude til underkant af albuen.
8. **Personvægt**  
Opgiv seneste kendte vægt eller anslået vægt.

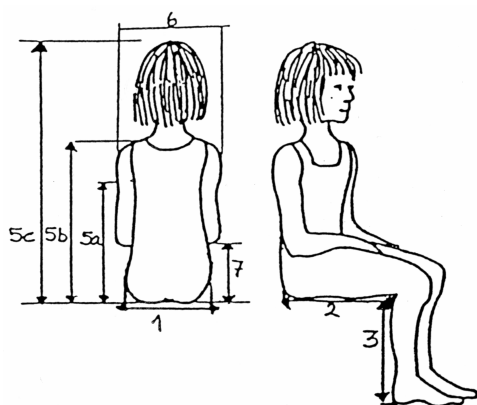

| Kørestol   | Personmål | Nuværende hjælpemiddel |
|--|-----------|------------------------|
| 1. Hoftebredde   |           |                        |
| 2. Sædedybde   |           |                        |
| 3. Underbenslængde   |           |                        |
| 4. Sædehjd. Over gulv  |           |                        |
| 5. Ryghøjde<br>A. sæde-axil<br>B. sæde-skulder<br>C. sæde-isse |           |                        |
| 6. Rygbredde   |           |                        |
| 7. Sæde – albue  |           |                        |
| 8. Personvægt  |           |                        |